

Bezpečná manipulace s pacienty pomocí správných výrobků a schopností



Zvedací zařízení Liko™

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Specialisté na zvedání a přesuny

Déle než 30letá zkušenost s bezpečným a šetrným zvedáním a přesuny osob nám umožnily vyvinout dokonale specializovanou technologii a metodologii. Naším úsilím je vyvinout nejsnadnější, nejbezpečnější a nejúčinnější pomůcky na světě pro použití během zvedání a přesouvání, ze kterých by těžili jak pacienti, tak i jejich ošetřovatelé.

V současné době máme celosvětově nejširší a nejlépe fungující sortiment patientských zvedáků, závěsů a příslušenství.

V kombinaci s ostatní nabídkou z výrobní řady Hill-Rom® dokážeme poskytnout ucelená řešení místností pro nemocnice a další zdravotnická zařízení po celém světě.

Neustále se zaměřujeme na bezpečnost, kvalitu a životní prostředí. Samozřejmostí je naše certifikace podle příslušných norem, která dodává uživatelům našich výrobků jistotu.

V tomto prospektu vám představujeme výběr našich výrobků. Kontaktujte nás prosím a společně jistě nalezneme nejlepší řešení i pro Vás.



Závěs je polovinou zvedáku

1. Horizontální zvedání

Ve vodorovné poloze se často zvedají vážně zraněné osoby. Nabízíme několik různých nosítek a metod zvedání (např. pro pacienty na jednotkách intenzivní péče, oddělení chirurgie, s poraněním zad či popáleninami). Nabízíme také příslušenství pro přesuny z pohotovostních a ambulantních nosítek a lehátek.

2. Polohování

Zvedání a polohování pacienta je jedna z nejběžnějších činností prováděných u lůžka. Při této činnosti také dochází k mnoha pracovním úrazům. K usnadnění tohoto úkonu nabízíme různé pomůcky.

3. Z lůžka na vozík

U většiny pacientů je to nejčastější potřeba zvedání. Pohodlí, bezpečí a jistota jsou důležité potřeby, na které je třeba myslet. Pro dosažení nejlepšího výsledku je nutné pečlivě vybrat i závěsnou hrazdu.

4. Na toaletu a z toalety

Zvedání těžce postižených osob a jejich přesun na toaletu a z toalety a současně schopnost svléci jim oděv vyžaduje použití promyšleného závěsu, který umožní maximální přístup k tělu pacienta bez ohrožení jeho bezpečnosti.

5. Citlivost na bolest/tlak

Osoby citlivé na bolest je nutné zvedat s obzvláštní péčí. Měkce vypoštované závěsy a vícebodové zavěšení přispívají k rozložení tlaku.

6. Návěk vstávání/chůze

Schopnost vstát a zatížit kostru a svaly váhou není jen ukázkou tělesného zdraví, ale přináší i uspokojení a zvýšení sebevědomí. Zvedací příslušenství do stoje společnosti Liko™ otvírá nové možnosti vzpřímeného postoje a pohybu v bezpečné a řízené formě.

7. Na podlahu a z podlahy

Není to pouze tehdy, kdy někdo upadne, kdy pocítíte potřebu zvedání z podlahy. Při rehabilitaci je potřeba přesunout pacienta na podlahu a z podlahy značně. Zvedáky Liko™ v kombinaci se závěsy, které podpírají celé tělo, umožňují tento přesun provést tím nejšetrnějším způsobem, a to jak pro pacienta, tak i pro ošetřovatele.

Závěs, jako polovina zvedáku, je koncepce, kterou propagujeme již mnoho let. Bez pečlivě zvoleného a správně přizpůsobeného závěsu není zvedání nikdy tak šetrné a plynulé, jak by mělo být. Toto je základní myšlenka naší filozofie při vývoji zelených závěsů Liko™. Abychom mohli vyvinout optimální závěs, je nutné znát podrobnosti o stavu a situaci pacienta ve všech směrech, tedy jak po stránce fyzické, tak i sociální. K tomuto poznání jsme dospěli po letech úzké spolupráce s našimi zákazníky a v dnešní době nabízí Liko™ závěsy pro každou situaci.

Katalog závěsů zveřejněný na našich webových stránkách vám pomůže zvolit nejvhodnější závěs pro potřeby vašeho pacienta. Dozvíte se zde také více o různých situacích, které mohou při zvedání pacientů nastat.

1. HORIZONTÁLNÍ ZVEDÁNÍ



2. POLOHOVÁNÍ



3. Z LŮŽKA NA VOZÍK



4. NA TOALETU A Z TOALETY



5. CITLIVOST NA BOLEST/TLAK



6. NÁCVIK VSTÁVÁNÍ/CHŮZE



7. NA PODLAHU A Z PODLAHY



8. ZVEDNUTÍ A DRŽENÍ



8. Zvednutí a držení

Každé zvednutí a držení ruky nebo nohy může představovat těžký úkon, který lze zjednodušit použitím patientského zvedáku. Nabízíme zvedací příslušenství speciálně vyvinuté pro každý konkrétní úkon.

9. Koupání a sprchování

Závěsy Liko™ pro koupání a sprchování jsou vyrobeny z prodyšné síťoviny s plastovým povrchem. Jsou k dispozici v několika modelech, aby splňovaly různé potřeby jednotlivých pacientů tím nejlepším možným způsobem, co do podpory a pohodlí.

9. KOUPÁNÍ A SPRCHOVÁNÍ



10. AMPUTACE NOHOU



11. ZVEDÁNÍ DĚTÍ



10. Amputace nohou

Společnost Liko™ nabízí několik metod zvedání osob po amputaci nohou. Zvolený model závisí na stupni amputace a na situaci, v níž je třeba zvednutí provést.

11. Zvedání dětí

Děti nejsou malí dospělí. Potřeba zvedání při rehabilitaci je často velmi specifická a vyžaduje velkou péči a zvláštní dovednosti. My ve společnosti Liko™ máme v tomto oboru značné zkušenosti a neustále vyvíjíme nové metody.

12. ZÁVĚS NA JEDNO POUŽITÍ



13. DO BAZÉNU A Z BAZÉNU



14. OBÉZNÍ PACIENTI



12. Závěs na jedno použití

Krokem v boji proti multirezistentním bakteriím je nepoužívat stejný závěs pro mnoho různých pacientů. Proto společnost Liko™ vyvinula sortiment závěsů a dalšího příslušenství Solo pro jednorázové použití.

13. Do bazénu a z bazénu

Přenášení osob do bazénu lze provést, když sedí v koupací židli nebo ve vhodném závěsu vyrobeném z prodyšné síťoviny s plastovým povrchem.

14. Obézní pacienti

Zvedání velmi těžkých pacientů vyžaduje současné použití specializovaných zařízení a specializovaných technik. V naší nabídce máme výrobky, které mohou zvednout a polohovat pacienty o hmotnosti až do 500 kg.

Mobilní zvedáky pro každou situaci

Mobilní zvedák může představovat nejlepší řešení v dočasných situacích nebo v případě omezených finančních možností. Všechny naše mobilní zvedáky mají speciální vlastnosti, které splní různorodé potřeby. obraťte se na autorizovaného zástupce Hill-Rom®, který vám pomůže zvolit optimální řešení.



Komplexní mobilní zvedák

Golvo™

Někdy je volba mezi mobilním a stropním zvedákem celkem obtížná. Liko™ však tuto volbu díky úspěšnému modelu Golvo™ dokáže usnadnit. Jedná se o unikátní mobilní zvedák, který nabízí výhody stropního zvedáku. Golvo™ díky svému patentovanému zvedacímu principu a pružným popruhům nabízí unikátní flexibilitu a všestrannost.

Sklápěcí opěrky rukou, kterými je zvedák Golvo™ standardně vybaven, činí ze zvedáku ideální pomůcku pro nácvik chůze během rehabilitace.

Konstrukcí z recyklovatelného hliníku šetrnému k životnímu prostředí se zvedák Golvo™ stává silným, ale přitom lehkým mobilním řešením, na které se můžete spolehnout v každé situaci. Chytré technologie, jako jsou například bezdrátové ruční ovládání, inteligentní ovládání a akumulátor šetrný k životnímu prostředí, dotváří Golvo™ v každém smyslu slova.

Speciální verze zvedáku Golvo™ je přizpůsobena pro přístup pod nízká lůžka. Říkáme jí Golvo™ LowBase.

Důležité funkce

- Vertikální pohyb zvedání, který je možný díky flexibilnímu zvedacímu popruhu, je nejlogičtější a nejjednodušší způsob zvedání osob.
- Možnost paralelní a symetrické úpravy šířky základny usnadňuje přístup ve všech situacích.
- Sklápěcí opěrky rukou, které může držet jak pacient tak ošetřovatel zajišťují větší pocit stability i bezpečí.
- Bezdrátové ruční dálkové ovládání umožňuje ošetřovateli zůstat během zvedání v blízkosti pacienta.
- Konstrukce z recyklovatelného hliníku a NiMH akumulátor šetrný k životnímu prostředí.

Max. zatížení: 200 kg

K dispozici jsou následující modely

Golvo™ 8000 | 8008 | 8008 LowBase



Zvedák Golvo™ je díky své konstrukci zvláště vhodný pro zvedání pacienta ve vodorovné poloze.



Flexibilní popruh zvedáku přizpůsobí zvedák pacientovi.

Nechte rozhodnout vaše potřeby

Znalosti, které jsme nasbírali za 30 let vývoje výrobků, se zúročily v jedinečnou řadu zvedáků, které se navzájem doplňují. Řada Viking™ vyřeší většinu zvedacích situací v nejrůznějších případech péče o pacienta a její přizpůsobivost je stejně široká jako naše nabídka příslušenství. Řada Viking™ se vyrábí v pěti modelech, od nejmenšího Viking™ XS k super silnému Viking™ XL.

Rozhodněte se podle svých potřeb, který typ zvedáku Viking™ zvolíte.

Univerzální zvedák

Viking™ (M)

Viking™ M je optimální mobilní zvedák, který pokryje širokou škálu potřeb a vyhoví i těm nejnáročnějším požadavkům v nejběžnějších situacích. Se zvedákem se snadno manipuluje i ve velmi stísněných prostorách. Ačkoliv Viking™ M váží jen 34 kg, dokáže v některých situacích zvednout až 205 kg.



Se správnými asistenčními pomůckami je přesun pacienta z podlahy bezpečnější a jednodušší. Chytré příslušenství jako je závěsné rameno a nástavec FlexLink zajišťuje dodatečnou flexibilitu.



Horizontální zvedák OctoStretch™ umožňuje bezpečné a šetrné zvedání pacienta, například po operaci.



Se zvedákem Viking™ M se velmi jednoduše manipuluje ve stísněných prostorách a široký sortiment příslušenství Liko nabízí škálu závěsů pro hygienické potřeby.



Nácvik chůze je důležitá, avšak riziková procedura při každé rehabilitaci. Viking™ vybavený opěrkami pro ruce je bezpečný jak pro pacienta, tak i pro ošetřovatele.

Do stísněných prostor



Viking™ XS

Se šířkou pouhých 54 centimetrů je Viking™ XS nejmenší člen rodiny Viking™. Tento mobilní zvedák je nejužší na trhu a bez potíží projde i úzkými dveřmi. Viking™ XS je stabilní a spolehlivý mobilní zvedák, který je ideálním pomocníkem ve většině situací. Viking™ XS váží pouhých 25 kg a dokáže zvednout až 160 kg – pěkný výkon na tak malý stroj.



Viking™ S

Viking™ S je malý univerzální mobilní zvedák, který, i přes svoji malou velikost a nízkou hmotnost, odvádí neuvěřitelné výkony. Poradí si ve většině běžných situací, jako například při přesunu z lůžka či invalidního vozíku na toaletu a do vany nebo při zvedání ze země. Maximální zatížení je 160 kg, přičemž zvedák samotný váží pouhých 25 kg.

Pro nejnáročnější požadavky zvedání



Viking™ L

V porovnání se svou velkou zvedací kapacitou je Viking™ L neuvěřitelně snadno ovladatelný a představuje ideální řešení pro potřeby jak běžného zvedání tak zvedání těžkých pacientů. Díky nízké hmotnosti (necelých 40 kg) lze se zvedákem Viking™ L velmi snadno manipulovat, přitom ale dokáže zvednout až 250 kg. Zařízení je vybaveno inteligentní elektronikou, jako např. ručním dálkovým ovládním.



Viking™ XL

Viking™ XL byl vyvinut speciálně pro velmi těžké pacienty, vhodný je však i pro menší osoby. Viking™ XL je rovněž vybaven nejmodernější elektronikou, včetně ručního dálkového ovládním. Navzdory své velikosti váží tento mobilní zvedák pouhých 42 kg a dokáže zvednout až 300 kg. Viking™ XL tak představuje ideální řešení pro jakoukoli „těžkou“ situaci.

Univerzální odlehčený zvedák

LikoLight™

Pro ty, kteří potřebují lehký mobilní zvedák, který lze snadno složit, jsme vyvinuli LikoLight™. I když pracuje podobně jako jakýkoli jiný mobilní zvedák, jeho přidanou hodnotou je možnost vzít si jej s sebou, když cestujete, nebo jeho jednoduché uskladnění. LikoLight™ lze rychle rozložit na tři části, což usnadňuje jeho transport a skladování.

LikoLight™ je ideální pro použití ve většině běžných situací zvedání, např. při přesunu mezi lůžkem a invalidním vozíkem, na toaletu a z toalety, do vany a z vany a pro zvednutí osoby, která upadla na podlahu.

LikoLight™ je vybaven elektrickým zvedáním a spouštěním a mechanickou úpravou šířky základny.

LikoLight™ TravelBags jsou praktické přenosné vaky vyrobené z vícevrstvého měkkého odlehčeného materiálu.

Důležité funkce

- Snadno se skládá.
- Snadno se demontuje na tři části (žádná část neváží více než 10 kg).
- Vyrobeno z hliníku kvůli ochraně životního prostředí, kvalitě a designu.
- Díky volbě materiálu lze zvedák snadno posouvat a udržovat v čistotě. Zvedák je nerezavějící.
- Mechanické nouzové spouštění.
- Stabilní a odolný proti překlopení.
- Ideální na cestování.
- Jako příslušenství je k dispozici praktické pouzdro stolní nabíječky.

Max. zatížení: 140 kg



Zvedák LikoLight™ lze velmi snadno složit a rozložit.



Cestování se zvedákem LikoLight™ je díky vakům LikoLight™ TravelBags snadné a pohodlné.

Favorit pro každodenní potřebu zvedání

Uno™

Základní konstrukční zásady zvedáku Uno jsou dobře vyzkoušeny a otestovány. Společnost Liko™ vyvinula tento koncept a zvedák Uno™ vybavila mnoha chytrými funkcemi. Díky jednoduché konstrukci a unikátním funkcím se zvedák Uno™ rychle stal nejoblíbenějším v ústavní i domácí péči. Uno™ je ideálním zvedákem pro každodenní použití. Snadno se používá a ovládá a umožňuje pohodlný přístup i do prostorově omezených koupelen.

Důležité funkce

- Několik různých možností nastavení dovoluje snadné přizpůsobení různým situacím při zvedání pacienta, např. výškové nastavení stojanu zvedáku a úprava montáže pohonné jednotky.
- Chytrý nástavec FlexLink (dodatečné spojovací rameno pro prodloužení vzdálenosti od stojanu zvedáku) umožňuje prakticky svislé zvedání a zvyšuje flexibilitu při zvedání ze země.
- Jednoduché, snadno použitelné a bezpečné mechanické nouzové spouštění.
- Elektrické nouzové spouštění a zvedání (některé modely).

Max. zatížení: 160-205 kg

K dispozici jsou následující modely

Uno™ 100 EM, EE | 102 EM, EE, ES | 200

Liko™ M220/M230

Stejně jako ostatní výrobky Liko™, tak i mobilní zvedáky Liko™ M220 a M230 se pyšní intuitivní konstrukcí, která velmi usnadňuje jejich použití i pro ošetřovatele, kteří se teprve své práci učí.

Tento základní zvedák je k dispozici se širokou škálou závěsů a příslušenství a zajišťuje bezpečné a pohodlné zvedání jak pro ošetřovatele v ústavní tak i domácí péči.

Max. zatížení: 180 kg



Uno™ je nejoblíbenější v mnoha různých situacích zvedání. Na obrázku Uno™ 102 při zvedání pacienta z invalidního vozíku.



Zvedání z podlahy není se zvedákem Uno™ žádný problém.



Díky svému dlouhému ramenu dokáže Liko™ M230 snadno uložit pacienta doprostřed lůžka.



Likorall^{ms} je jeden z nejpoužívanějších motorů pro stropní zvedáky na světě.

Vždy po ruce a nezabírají cenný prostor na podlaze


Stropní zvedací systém umožňuje pacienta zvednout a přenést s minimálním úsilím a maximální bezpečností, bez ohledu na nábytek v místnosti. Stropní zvedák je vždy po ruce a jeho použití je snadné a bezpečné. Pro pacienta i pro ošetřovatele.

Náš stropní zvedací systém je obsáhlý a skládá se z mnoha komponentů, což je nezbytné k vyřešení těch nejrůznějších instalačních situací. Dobíjení motoru zvedáku je snadné a pohodlné pomocí dálkového ovladače nebo přímo v kolejnici (viz následující stránka). Zvedací systémy se hodí do každého prostoru a splňují ty nejnáročnější požadavky kladené na funkčnost, bezpečnost a dostupnost. Pomůžeme vám vždy zvolit to správné řešení.


Příklad oblastí uplatnění

- Ošetrovna
- Domácí péče
- Koupelna
- Nemocnice,
- Jednotky intenzivní péče
- Přesun z místnosti do místnosti
- Bazén
- Rehabilitace, fyzioterapie chirurgické odd.


PŘESUN MEZI DVĚMA MÍSTY S PEVNOU KOLEJNICÍ
(SYSTÉM PŘÍMÉ KOLEJNICE)

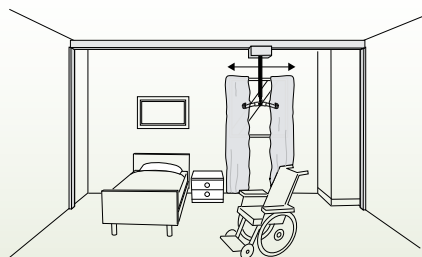


PŘÍKLAD PŘESUNU Z MÍSTNOSTI DO MÍSTNOSTI

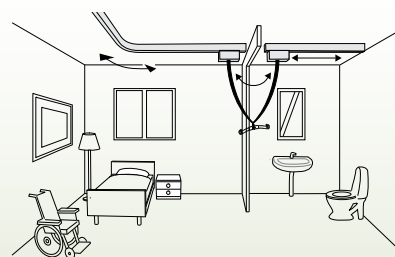

TRAVERZOVÝ SYSTÉM POKRÝVAJÍCÍ CELOU PLOCHU

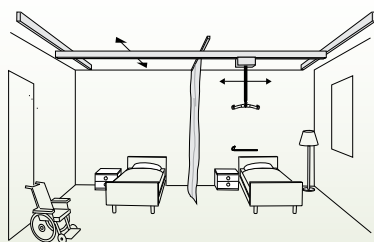

VOLNĚ STOJÍCÍ ŘEŠENÍ ZVEDÁNÍ

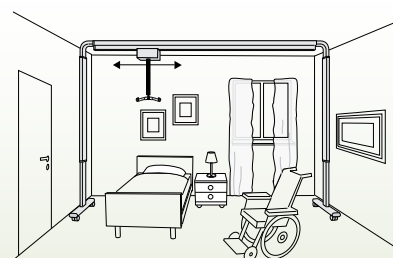

Bezpečnost a technologie na vysoké úrovni

Likorall™

Každý den zvedají desítky tisíc osob a šetří stejné množství zad. Uživatelská přívětivost, opravdový zájem o bezpečnost a pečlivě promyšlený design zajišťují motorům Likorall™ vysoké ocenění jak mezi ošetřovateli tak i pacienty. Kombinace jedinečné technologie, spolehlivosti a snadné obsluhy činí z motorů Likorall™ velice moudrou volbu pro každého zákazníka.

Jedinečný bezpečnostní systém

- Patentovaný bezpečnostní buben SFS. Činí systém ještě bezpečnější a zajišťuje rovnoměrné a řízené spouštění.
- Bezpečnostní vypínač navíjení SSP.
- Zvedací popruh s desetinasobným zabezpečením.
- Bezpečnostní západky na zvedacím příslušenství.
- Mechanické nouzové spouštění (některé modely).
- Elektrické nouzové spouštění se záložním akumulátorem.
- Nouzový vypínač splňující nezbytné požadavky normy EN ISO 10535 a IEC 60601-1.

Přesun z místnosti do místnosti

Likorall™ R2R umožňuje hladký přesun pacientů mezi dvěma místnostmi, které nejsou propojeny kolejnicemi. Podrobnější informace vám poskytne autorizovaný zástupce společnosti Liko™.

Max. zatížení: 200-250 kg

K dispozici jsou následující modely

Likorall™ 200 | 242 S, S R2R, ES, ES R2R | 243 ES | 250 ES



Přesun motoru zvedáku

Když se změní požadavky na použití, lze motor Likorall™ snadno přesunout do jiné místnosti pomocí rychloupínacího jezdece Quick-Release Hook™.



Nabíjení v kolejnici

Nabíjení v kolejnici Liko™ nabízí volnost a dostupnost. Zvedací jednotka je neustále nabíjena v celé délce kolejnicového systému a je tedy vždy připravena k použití.



Snadné nabíjení

Likorall™ lze též nabíjet umístěním ergonomicky řešeného ručního ovladače do nabíječky připevněné na zdi.



Multifunkční stropní zvedák

Multirall™ 200

Na mnoha místech, kde se pečuje o pacienty, například v nemocnicích a pečovatelských domech, je potřeba zvedacích pomůcek v místnosti dočasná a závisí na fyzickém stavu daného pacienta.

V takovém případě může být vhodnou alternativou mobilního zvedáku přenosný stropní zvedák.

Zvedák Multirall™ zvedne až 200 kg a díky rychloupínacímu systému a prodlužovacímu ramenu jej lze rychle a snadno připevnit ke stropní kolejnici a opět sejmout. Zvedák se dá tak velmi snadno přenášet mezi místnostmi bez náradí a jakékoliv fyzické námahy.

I v případě potřeby přesunu pacienta mezi dvěma místnostmi bez propojeného kolejnicového systému je Multirall™ dobrým a úsporným řešením. Díky tomuto chytrému řešení se použije pouze jeden motor a mezi dvěma místnostmi se přesunuje pacient sedící v závěsu.

Důležité funkce

- Flexibilní zvedák, který lze použít různými způsoby.
- Snadno se přemísťuje, bez potřeby náradí.
- Spolehlivý integrovaný zabezpečovací systém.
- Užitečné příslušenství: vozík Multirall™, prodlužovací rameno atd.
- Velké rukojeti na obou stranách motoru.
- Komplexní kolejnicový systém, včetně možnosti použití volně stojících prvků se systémem FreeSpan™.
- Lze použít s celou řadou příslušenství Liko™.

Max. zatížení: 200 kg



Přesun z místnosti do místnosti

S popruhem umístěným mezi dvěma místnostmi lze přesuny provádět pomocí jediného motoru zvedáku.



Vozík Multirall™

Praktický vozík pro přesun, instalaci a skladování systému Multirall™.

Přímá kolejnice nebo traverza – výběr je na Vás!

FreeSpan™

Systém FreeSpan™ je flexibilní řešení většiny situací stropního zvedání. Zvedací systém stojí volně v místnosti, a tudíž neklade žádné požadavky na stavební úpravy zdi nebo stropu.

FreeSpan™ je k dispozici jako systém s přímou kolejnicí nebo jako traverzový systém (H-systém), je vyrobený z hliníku a je k dispozici v mnoha různých délkách kolejnic.

Systém FreeSpan™ s přímou kolejnicí je vybaven kolečky, která usnadňují správné polohování systému pro zvedání a čištění. Usnadňují také přesun systému z jedné místnosti do druhé. K instalaci systému FreeSpan™ s přímou kolejnicí není potřeba žádné nářadí.

Traverzový systém FreeSpan™ je volně stojící traverzový (portálový) systém, který umožní zvednout pacienta z několika různých míst v místnosti. FreeSpan™ UltraTwin™ je verze určená pro obézní pacienty; více informací viz následující strana.

Důležité funkce

- Systém lze nainstalovat do jakéhokoli prostředí.
- Přímá kolejnice nebo traverza (H-systém).
- Různé délky kolejnic zvedáku.
- Snadno nastavitelná výška a šířka.
- Vyrobeno z hliníku kvůli ochraně životního prostředí, kvalitě a designu.
- Díky volbě materiálu lze zvedák FreeSpan™ snadno posouvat a udržovat v čistotě. Zvedák je nerezavějící.



Volně stojící systém je výborným řešením pro dočasné potřeby zvedání, například v pečovatelských domech nebo při domácím ošetřování.



K instalaci systému FreeSpan™ s přímou kolejnicí není potřeba žádné nářadí.



Traverzový systém FreeSpan™ může pokrýt velkou plochu místnosti.



FreeStand™

FreeStand™ je cenově dostupný volně stojící systém, pro který jsou k dispozici různé délky kolejnic (až do 3,2 m). Systém se dodává v kombinaci s motorem Likorall™ a je vyroben z práškově bílou barvou lakované oceli. Podrobnější informace vám poskytne autorizovaný zástupce společnosti Liko™.



Obézní pacienti mají speciální potřeby.

Již mnoho let spolupracujeme s řadou velkých nemocnic, které se specializují na péči a léčbu obézních pacientů. To z nás udělalo průkopníky v oboru zvedacích řešení speciálně upravených pro velmi těžké pacienty. K poskytování dobré péče nestačí pouze instalace zvedacího zařízení s vysokou nosností. Neméně důležité je však i speciálně upravené příslušenství.

Sezení, ležení nebo chůze – rozhodují potřeby pacienta.



Náš stropní zvedací systém UltraTwin™ je vybaven dvěma motory Liko[®]all™, s jejichž pomocí lze zvednout až 500 kg.




Horizontální zvedáky pro těžké pacienty jsou k dispozici jak v mobilní, tak i stropní verzi. Na obrázku je zvedák Viking™ XL se závěsem FlexoStretch™.



Příslušenství Liko™ LiftPants™ a MasterVest™ pro trénink stoje a chůze jsou vynikající pomůckou při rehabilitaci.


Zvedací řešení pro obézní pacienty

Na následujících obrázcích jsou zobrazena nejběžnější řešení pro zvedání a přesun obézních pacientů. obraťte se na svého specialistu Liko™, který vám pomůže s vyhodnocením vašich potřeb a výběrem optimálního řešení. Více informací naleznete též na našich webových stránkách.

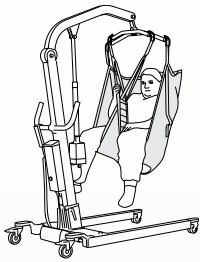


Mobilní zvedák Viking™ XL

Řada Viking™ představuje několik různých mobilních zvedáků určených pro širokou škálu aplikací a nosností. Nosnost zvedáků Viking™ L a XL činí 250 kg, resp. 300 kg. Tyto zvedáky představují vynikající alternativu pro mnoho obézních pacientů. Vzhledem k tomu, že jsou vyrobeny z hliníku, je manipulace s nimi relativně jednoduchá, a to i s těžkými pacienty.

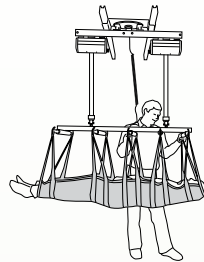

Stropní zvedák UltraTwin™

Náš stropní zvedací systém UltraTwin™ je vybaven dvěma motory Likorall™, s jejichž pomocí lze zdvihnout až 500 kg. Příslušenství UltraTwist™ pak nabízí unikátní možnost úpravy polohy pacienta v průběhu přesunu. Zvedáky se ovládají pomocí jednoho nebo dvou ručních ovladačů.

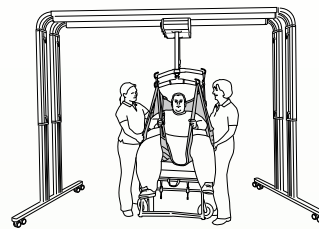

Volně stojící zvedák UltraTwin™

Je-li potřeba zvedání pouze dočasná, nebo pokud nelze provést trvalou instalaci, je dobrým řešením zvedák FreeSpan™. FreeSpan™ UltraTwin™ je k dispozici jak s přímoú kolejničí, tak i jako traverzový systém, který pokryje větší plochu místnosti. Maximální zatížení: až 500 kg.



Závěs Liko™ UltraSling™

UltraSling™ je závěs pro zvedání/přesun nejtěžších pacientů vsedě. Závěs má samostatnou sekci pro nohy, která je připojena k závěsné hrazdě. Maximální nosnost závěsu UltraSling™ je 500 kg a používá se společně se systémem UltraTwin™ buď v trvalé nebo volně stojící instalaci ve FreeSpan™.



RepoSheet Ultra

Otáčení a polohování obézních pacientů za účelem zabránění vzniku proleženin může být v mnoha zařízeních složitým úkolem. Prostěradlo RepoSheet™ je vhodné pro velmi silné pacienty a jeho maximální nosnost je 500 kg. Používá se se systémem UltraTwin™ nebo například mobilním zvedákem Viking™.




Trénink chůze s kalhotami LiftPants™

Postavení obézních pacientů na nohy je při rehabilitaci, např. po operaci, velmi důležitým krokem. Kalhoty Ultra LiftPants™ poskytují dobrou oporu celému tělu a dodávají pacientovi sebedůvěru potřebnou pro první kroky. Max. zatížení: až 500 kg.



HandySheet™

Vložení závěsu pod velmi těžkého pacienta může být obtížný a namáhavý úkol. HandySheet™ usnadňuje manipulaci a lze jej použít též pro menší přesuny na lůžku.

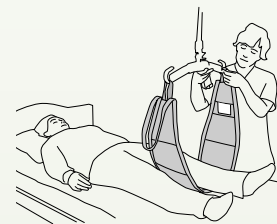

MultiStrap™

V řadě ošetrovatelských situacích je zapotřebí zdvihnout a držet část těla, jako např. ruku nebo nohu, ve vzduchu. U velmi těžkých pacientů se může jednat též o pouhé zvednutí, např. břicha při mytí. Společně se stropním zvedákem je pak MultiStrap™ dokonalou asistenční pomůckou.



Horizontální zvedání v nemocnicích

Největší potřeba zvedání pacientů ve zcela horizontální poloze je v nemocnicích. Jedná se zejména o zvedání osob na a z operačních nebo rentgenových stolů nebo jejich přemísťování mezi lůžkem a lehátkem.

Řada vážně zraněných pacientů, které je nutné zvedat horizontálně, jsou umístěni na jednotkách intenzivní péče. Proto jsme v úzké spolupráci se specialisty z JIP vyvinuli několik výrobků, které umožňují zvedání a přesouvání pacientů s minimálním účinkem na jejich tělo.

Těž nabízíme výrobky pro přemísťování pacientů z pohotovostních a ambulantních nosítek a lehátek.



Liko™ OctoStretch™

OctoStretch™ je jeden z našich nejběžnějších horizontálních zvedáků. Uvítají jej zejména na chirurgických, radiologických nebo JIP odděleních, díky rychlému a snadnému použití a nenáročnosti na prostor jak při provozu tak při skladování. OctoStretch™ lze použít se zvedacím prostěradlem (k dispozici v různých velikostech) nebo se 4-5 zvedacími popruhy.



LikoStretch 1900™

U nosítka LikoStretch 1900™ je zvedací prostěradlo připevněno k nosítkům pomocí popruhů v samozajišťovací pojistce, která se uzavírá lehkým tlakem. Zvedací prostěradlo se pokládá buď na lůžko předtím, než se pacient uloží, nebo je vkládáno pod již ležícího pacienta.



LikoStretch™ 600 IC

Nosítka LikoStretch 600™ IC se ve většině případů používají v nejzávažnějších případech u pacientů trpících popáleninami nebo poraněním zad, které nelze otočit na bok nebo které je nutné zvedat zcela horizontálně. Nejčastěji se používá se zvedacími popruhy, které lze snadno vsunout pod pacienta pomocí pružné lopatky. Tím se minimalizuje kontakt s pokožkou pacienta a pacient je zvedán v nezměněné poloze těla.



Liko™ FlexoStretch™

Vysoká maximální nosnost činí z Liko™ FlexoStretch™ obzvláště vhodné příslušenství pro těžké pacienty. Šířku nosítka FlexoStretch™ lze snadno upravit v rozsahu 70 až 95 cm vysunutím nebo zasunutím zvedacích ramen. Pro jednoduché zajištění horizontální polohy pacienta jsou nosítka FlexoStretch™ standardně vybavena vyvažovačem.



Liko UltraStretch™

Nejsilnější nosítka z našeho sortimentu UltraStretch™, mají maximální nosnost 400 kg, avšak váží pouhých 13,2 kg. Nosítka UltraStretch™ se používají společně se stropním zvedacím systémem UltraTwin™, který je vybaven dvěma vzájemně propojenými motory Likorall™. Z tohoto důvodu mají nosítka také dva upevňovací body, které musí být použity společně.

Stát na svých nohách

Pokud pacient nedokáže sám stát, lze jeho zvedání a stání usnadnit různými pomůckami. Nabízíme několik různých funkčních řešení, která pomohou nejen pacienta zvednout a kompenzovat jeho špatnou rovnováhu, ale přispívají i k aktivnímu tréninku a posilování svalů.

Stojícím pacientům lze navíc snáze pomoci na toaletu i na další místa, jako např. do křesla, invalidního vozíku či na lůžko.



Zvedák Sabina™ II v kombinaci se závěsnou hrazdou 350 a vestou Liko™ SupportVest™ je komfortní závěs, který zvedá pacienta za záda a v podpaží.

Tři zvedáky v jednom

Sabina™

Sabina™ je univerzální zvedák ze sedu do stáje s jednoduchou obsluhou, určený pro pacienty, kteří se mohou aktivně účastnit pohybu při vstávání.

Při zvedání se používá vesta ke vstávání ze sedu, která zvedá horní část těla pacienta. K dispozici je několik různých typů vest ke vstávání ze sedu, které splňují požadavky různých pacientů. Vestu lze například umístit do podpaží nebo vně paží pacienta.

Již vestoje lze pacienta snadno a hladce přesunout například na invalidní vozík nebo na toaletu. Společně s přemístěním tak pacient podstupuje hodnotný nácvik stání. K dispozici jsou dva různé modely zvedáku Sabina™ s mírně odlišnými funkcemi:

Základním modelem je Sabina™ 200, který, stejně jako jeho větší sestra, nabízí pohodlné, bezpečné a ergonomicky správné zvedání. Je možné upravit pozici podpěry dolní části nohou a zvedací pohyb i úprava šířky základny mají elektrický pohon.

Zvedák Sabina™ II se zaměnitelnou závěsnou hrazdou nabízí nové možnosti. Širší závěsná hrazda Comfort umožňuje přizpůsobit zvedání pacientům zvláště citlivým na bolest nebo pacientům s jednostrannou paralýzou.

Dále lze zvedák Sabina™ II společně s běžným závěsem použít ke zvedání ze sedu, a to například v době, kdy není pacient dostatečně silný na to, aby aktivně vstal.

Důležité funkce

- Široká škála příslušenství pro mnoho individuálních aplikací.
- Přizpůsobitelné nastavení výšky pro různě vysoké pacienty.
- Umí zvedat v podpaží nebo vně paží (Sabina™ II).
- Lze použít při zvedání ze sedu do stoje (Sabina™ II).
- Podpěru dolní části nohou a opěrku chodidel lze podle potřeby snadno odstranit.

K dispozici jsou následující modely

Sabina™ II EM, EE | 200

Max. Zatížení: 160 - 200 kg



Se správným modelem závěsu, je zvedák Sabina™ II rovněž vhodný ke zvedání sedících pacientů.



Zvedák Sabina™ II v kombinaci se závěsnou hrazdou 350 a vestou Liko™ SupportVest™.

Vstávejte sami

RollOn™

RollOn™ je podpěra při vstávání, která slouží k bezpečnému průběhu pohybu ze sedu do stoje a naopak. Bezvadně funguje jako pomůcka při přesunech na toaletu a z toalety nebo mezi lůžkem a vozíkem. Zvedák RollOn™ může být také dobrou alternativou invalidního vozíku v takových situacích, kdy rovnováha pacienta není dostatečná, například při prvním přesunu po operaci nebo po porodu.

Základní princip zvedáku RollOn™ spočívá ve využití vlastní pacientovy síly k pohybu ze sedu do stoje. Jakmile povstane, obklopí ho bezpečná a stabilní podpěra.

Důležité funkce

- Stabilní a bezpečný.
- Několik možností nastavení pro dokonalé přizpůsobení konkrétnímu pacientovi.
- Základna s nastavitelnou šířkou.
- Polstrované zadní podpěry dodávají pocit bezpečí a velmi snadno se polohují.
- Vyrobeno z hliníku kvůli ochraně životního prostředí, kvalitě a úspornosti.
- Díky volbě materiálu lze zvedák RollOn™ snadno posouvat a držovat v čistotě. Zvedák je nerezavějící.

Max. zatížení: 160 kg



Po uchopení za zvedací rukojeti se pacient sám vytáhne do stoje.



HandyTube™ Wide je správná pomůcka například při rychlých přesunech mezi lůžkem a mobilním lehátkem.



HandySheet™ usnadňuje aplikaci závěsů.



Pás HandyBelt™ pomáhá pacientovi a ošetřovateli udržet správný pracovní postoj.

Krátké a jednoduché přesuny.

Handy™

Jednoduché pomůcky, které jsou vždy po ruce: těmito slovy by se dala shrnout řada výrobků Handy™ společnosti Liko. Řada se skládá z několika praktických ručních pomůcek, které doplňují naši širokou škálu pacientských zvedáků a příslušenství.

HandySheet™ a HandyTube™

HandySheet™ je výborná pomůcka k usnadnění aplikace závěsů, a to zvláště u velmi těžkých pacientů, pacientů citlivých na bolest nebo u pacientů s kontrakturami.

HandyTube™ se používá pro kratší přesuny na lůžku a je k dispozici ve třech různých modelech, pro různé aplikace.

Důležité funkce

- Velmi dobrá klouzavost, a to i po opakovaném praní.
- Praktické rukojeti a kapsy usnadňující přesun.
- Maximální využití vlastní kapacity pacienta.

HandyBelt™

Pás HandyBelt™ se používá u pacientů se sníženou mobilitou, kteří však potřebují pouze minimální pomoc k tomu, aby provedli přesun sami. Prakticky umístěné rukojeti zajišťují lepší úchop a lepší pracovní postoj než čistě manuální techniky.

Situace, ve kterých se pás HandyBelt™ dá využít, jsou například: přesuny při vstávání ze sedu, přesuny při přisednutí na jiné místo a podpora při vstávání a chůzi.

Důležité funkce

- Používá se společně s mechanickými pomůckami nebo místo nich.
- Prakticky umístěné rukojeti okolo pásu umožňují nejlepší možný úchop pro pacienty a ošetřovatele.
- Barevné značení pro rychlou orientaci ve velikostech.



Každý den usnadňujeme po celém světě život našim pacientům i ošetřovatelům.

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Hill-Rom a design a slovní označení Hill-Rom jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Hill-Rom Services Inc. Liko a design a slovní označení Liko jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Liko R&D AB. Golvo, Viking, LikoLight, Uno, Liko M220/230, Likorall, Multirall, FreeSpan, FreeStand, UltraTwin, Liko UltraSling, RepoSheet Ultra, HandySheet, MultiStrap, Liko OctoStretch, LikoStretch 1900, LikoStretch 600C, LikoStretch 1800, Liko FlexoStretch, Liko UltraStretch, Sabina, Rollon, HandySheet, HandyTube, HandyBelt jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Liko R&D AB.

Autorizované zastoupení pro ČR:

DARTIN

DARTIN, spol. s r.o.
Suchdolská 688, 25262 Horoměřice
Tel./fax: 241 470 361, 261 216 076
www.dartin.cz
e-mail: info@dartin.cz

Autorizované zastúpenie pre SR:

DARTIN

DARTIN Slovensko, spol. s r.o.
Ľ. Podjavorinskej 25, 08005 Prešov
Tel./fax: 051/7734403, 7723634
www.dartin.sk
e-mail: info@dartin.sk

www.hill-rom.com
www.liko.com

Společnost Hill-Rom si vyhrazuje právo na změnu konstrukce, specifikací a modelů bez předchozího upozornění. Jedinou zárukou poskytovanou společností Hill-Rom je výslovná písemná záruka týkající se prodeje nebo pronájmu výrobků společnosti.

© 2011 Hill-Rom SARL, VŠECHNA PRÁVA VYHRAŽENA