



NEO-II

novorozenecký
resuscitační systém



David NEO-II

Integrovaný resuscitační systém pro použití s konvenčním T-kus resuscitačním okruhem, nebo s okruhem Inspire rPAP

Optimalizovaná resuscitace s integrovaným systémem

David NEO-II - přenosný resuscitační systém pro bezpečnou a efektivní resuscitaci. Umožňuje odsávání dýchacích cest, aktivní prodýchání s T-resuscitátorem, případně unikátním systémem Inspire rPAP pro nasální resuscitaci, nebo jen podávání kyslíku. NEO-II to vše kombinuje do jediného celku.

Bezpečná a jemná ventilace je klíčová během stabilizace a resuscitace novorozenců. NEO-II disponuje víceúrovňovou regulací inspiračního tlaku - PIP, umožňuje rychlé nastavení koncentrace kyslíku mezi 21 a 100 % a má odsávací jednotku s neonatálním rozsahem podtlaku.


Druhý regulovatelný výstup průtoku lze použít pro jednoduchou kyslíkovou terapii, k „napájení“ ručního vaku kyslíkem nebo pro Inspire rPAP® okruh k nasální stabilizaci a resuscitaci s výrazně nižší dechovou prací.

3 funkce v jednom

Plná integrace odsávačky, T-resuscitátoru a sekundárního zdroje průtoku. NEO-II umožňuje resuscitaci v souladu s doporučením ILCOR. Vše v jednom přístroji s jednoduchým ovládáním

Přenosný

S nízkou hmotností a kompaktními rozměry lze resuscitační systém NEO-II snadno přemísťovat. Může být postaven na polici, nebo uchycen na mobilní stojan či tyče různých průměrů

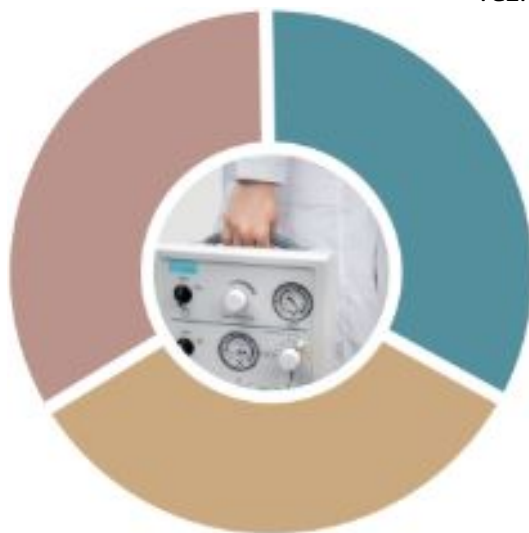

Spolehlivé řízení tlaku

Víceúrovňové limitování inspiračního tlaku zajišťuje, že předem nastavené hodnoty zůstávají stabilní během celé doby resuscitace bez ohledu na změny ve stavu plic novorozence

Základní parametry

Rozměry	290 mm x 180 mm x 370 mm
Hmotnost	< 6 kg
Odsávačka - rozsah podtlaku	-140 - 0 kPa
Kyslíková koncentrace	21 - 100 %
Průtok 1 - resuscitační okruh	0 - 15 l/min.
Průtok 2 - sekundární / rPAP	0 - 15 l/min.
PIP - rozsah nastavení	1 – 60 cmH2O

Příslušenství:

- Jednorázový okruh s T-kusem a PEEP-ventilem
- Neonatální masky velikostí 0 a 1
- Inspire rPAP aplikátor s okruhem
- Inspire rPAP nostrilky S, M a L
- Testovací plíce pro přednastavení tlaků
- Mobilní stojan s košem



DARTIN

DARTIN spol. s r. o.

Suchbátská 688

252 62 Horoměřice

Tel.: 241 470 361, 734 155 235

URL: <http://www.dartin.cz>

e-mail: info@artin.cz

Ningbo David Medical Device Co., Ltd.

Add Bldg No.5 Ningbo Smart Park

#98 Chuanyuan Rd, Hi-tech Zone, Ningbo, P.R. China

Phone: +86 574 87800008

URL: <http://www.nbdavid.com>

e-mail: sales@nbdavid.com