

KANMED[®] BABYBED

KANMED BABY WARMING SYSTÉM



Kanmed BabyBed vám nabízí mnoho možností. Podívejte se, jak si můžete postýlku nakonfigurovat podle svých požadavků.



Nakonfigurujte svůj Kanmed° BabyBed



voda se správnou teplotou
poskytuje optimální ohřívání

Kanmed° BabyBed je moderní a praktická postýlka, určená pro péči o novorozence, včetně předčasně narozených, v podmínkách střední a nízké intenzity péče. Postýlka byla vyvinuta ve spolupráci se zdravotnickými profesionály s cílem zajistit vysokou úroveň ergonomie. Kanmed° BabyBed má jedinečné spouštěcí boční stěny, snadné používání a velmi snadno se čistí. Postýlka Kanmed° BabyBed se vyrábí ve Švédsku a vztahuje se na ni 5 letá záruka.

Postýlka Kanmed° se často používá spolu s topnou podložkou Kanmed° BabyWarmer a vytváří tak Kanmed° BabyWarming systém. Se systémem Kanmed° BabyWarming budete potřebovat méně inkubátorů a snížíte celkové náklady. Postýlka Kanmed° BabyBed má jedinečný výběr možností a příslušenství. Výběrem nejvhodnějšího modelu a příslušenství získáte postýlku, která plně vyhovuje vašim potřebám.

VYBERTE MODEL POSTÝLKY S KOLEJNICÍ NEBO BEZ NÍ

S plastovou kolejnicí po obvodu

- ☐ BB100 Elektricky nastavitelná výška
- ☐ BB300 Fixní výška
- ☐ BB400 Elektricky nastavitelná výška
- ☐ BB400F Fixní výška

Bez kolejnice

- ☐ BB101 Elektricky nastavitelná výška
- ☐ BB301 Fixní výška
- ☐ BB401 Elektricky nastavitelná výška
- ☐ BB401F Fixní výška

S kovovou kolejnicí po obvodu

- ☐ BB102 Elektricky nastavitelná výška
- ☐ BB302 Fixní výška
- ☐ BB402 Elektricky nastavitelná výška

VARIANTY STANŮ

K dispozici jsou různé vnější a vnitřní barvy, aktuální vzory naleznete na www.kanmed.se.

- ☐ BB160 (standard) (A)
- ☐ BB162 (B)
- ☐ BB161 (C)
- ☐ BB460 (twin standard) (D)



A



B




C



D

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ☐ 800-0518 IV tyč ø 25 mm, D 66 cm (A)

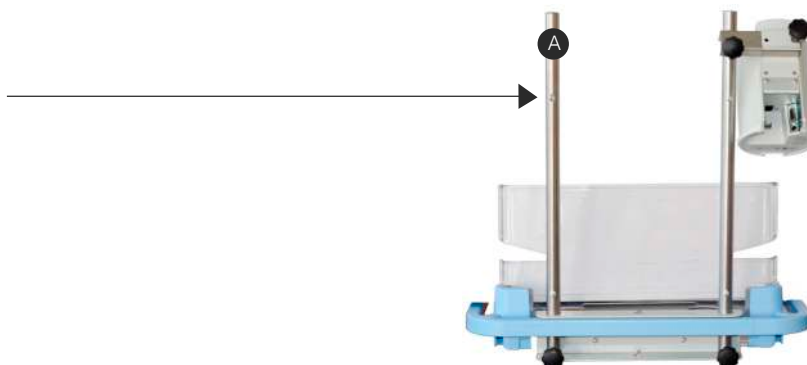

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Všechny postýlky zahrnují: stan BB160 (BB460 pro twin verzi), tyč stanu, pěnovou matraci, boční stěny, jeden úložný box BB170, napájecí kabel a návod k použití.

Verze Twin
s 2 individuálně
nastavitelnými podložkami
Kanmed® BabyWarmer
a předním pedálem



S kolejnici



Bez kolejnice



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- BB171 Držák láhve
- BB173 Trendelenburg sada pro náklon $\pm 17^\circ$
- 800-0502 Kabel pro BabyWarmer jednotku (zásuvka na sloupu postýlky)
- BB170 Úložný box (extra)
- BB180 Police 33 x 33 cm, bočnice 3 cm (plastem potažená ocel)
- BB190 Police 33 x 33 cm, bočnice 5 cm (plastem potažená ocel)

ELEKTRICKY NASTAVITELNÁ VÝŠKA

- BB175 Pedál vlevo (standardně)
- BB175 Pedál vpravo (specifikovat v objednávce)
- BB176 Pedál vpředu (specifikovat v objednávce)

KOLEČKA

- 700-0874 Standardně 125 mm (A)
- 700-0884 Dvojitě 95 mm (snižují postýlku o 4 cm)



A



B

KANMED[®] BABYBED

KANMED ^o BABYBED		BB100 / 101 / 102 Standard BB300 / 301 / 302 Fixní výška		BB400 / 401 Twin / 402 BB400F / 401F Fixní výška Twin					
Vnější rozměry		D 85 cm Š 63 cm s kolejkami		D 83 cm Š 52 cm bez kolejinic		D 95 cm Š 80 cm s kolejkami		D 93 cm Š 70 cm bez kolejinic	
Základna / kolečka		87 cm x 64 cm / průměr 12,5 cm alt. 9,5 cm, s brzdou							
Rozměry vaničky postýlky		D 69 cm Š 46,5 cm V 9 cm				D 76,5 cm Š 64 cm V 9 cm			
Výška dna vaničky nad podlahou		min. 78 cm, max. 108 cm; fixní výška 80 cm (9,5 cm kolečka snižují postýlku o 4 cm)							
Hmotnost		cca 46 kg; postýlka s fixní výškou 36 kg				cca 52 kg; postýlka s fixní výškou 42 kg			
Náklon		cca 17° (trendelenburg volitelně ±17°)							
Stan / matrace		pratelné při 60°C (90°C) / měkká pěna, utěsněný vodotěsný potah							
Úložný box / police		D 32 cm Š 33 cm V 12 cm, víko 32 x 33 cm / 33 x 33 x 3 cm nebo 33 x 33 x 5 cm							
Napájení BB100 / 400		230V 50Hz / 60Hz alebo 115V 60Hz, 150VA; BB100 / 400 třída ochrany I							

► Podložku BabyWarmer je možné používat samostatně v jakékoli vhodné postýlce.

KANMED[®] BABYWARMER

Je to měkká a vyhřátá vodní matrace, která dělá Kanmed Baby Warming systém unikátním.

Systém Kanmed Baby Warming je nejšetrnější způsob péče o vaše novorozence. Účinnost ohřívání moderního inkubátoru dokáže nahradit jen měkká matrace s teplou vodou. Když je novorozenec stabilní a jeho pokožka dozrává, může se přesunout do otevřeného systému Kanmed[®] Baby Warming. Rodiče se nyní mohou snadno zapojit a procvičit péči o svého novorozence nebo předčasně narozené dítě.



Důležité spojení rodiče s dítětem a kojení je nyní mnohem jednodušší. Kanmed Baby Warming Systém se používá v nemocnicích po celém světě jako bezpečná, nákladově efektivní a k dítěti šetrná alternativa nepřetržitě léčby v inkubátoru. Tím se může snížit počet potřebných inkubátorů a ušetřit peníze na jiné investice do novorozeneckého oddělení. Systém je dobře zdokumentován v publikovaných lékařských studiích.



Na celém světě se používá více než 15 000 systémů, které zahřály již více než 2 miliony dětí

Distributor pro ČR: **DARTIN**

DARTIN spol. s r. o.
Suchdolská 688, 252 62 Horoměřice
tel.: 241 470 361
e-mail: info@dartin.cz