



## BQ70

novorodenecký  
resuscitačný systém

## COMEN BQ70

Integrovaný resuscitačný systém pre použitie s konvenčným resuscitačným okruhom (T-kus) alebo s okruhom Inspire rPAP



# Optimalizovaná resuscitácia s integrovaným systémom

**Comen BQ70** - prenosný resuscitačný systém pre bezpečnú a efektívnu resuscitáciu. Umožňuje odsávanie dýchacích ciest, aktívne predýchanie s T-resuscitátorom, prípadne unikátnym systémom Inspire rPAP pre nazálnu resuscitáciu, alebo len podávanie kyslíka. BQ70 to všetko kombinuje do jediného celku.


Bezpečná a jemná ventilácia je kľúčová behom stabilizácie a resuscitácie novorozencov. BQ70 disponuje viacstupňovou reguláciou inspiračného tlaku - PIP, umožňuje rýchle nastavenie koncentrácie kyslíka medzi 21 a 100 % a má odsávaciu jednotku s neonatálnym rozsahom podtlaku.

Druhý regulovateľný výstup prietoku je možné použiť pre jednoduchú kyslíkovú terapiu, k „napájaniu“ ručného vaku kyslíkom alebo pre Inspire rPAP okruh pre nazálnu stabilizáciu a resuscitáciu s výrazne nižšou dychovou prácou.

## 3 funkcie v jednom

Plná integrácia odsávačky, T-resuscitátora a sekundárneho zdroja prietoku. BQ70 umožňuje resuscitáciu v súlade s doporučením ILCOR. Všetko v jednom prístroji s jednoduchým ovládaním

S nízkou hmotnosťou a kompaktnými rozmermi je možné resuscitačný systém BQ70 ľahko premiestňovať. Môže byť postavený na polici, alebo uchytený na mobilný stojan či tyč rôznych priemerov

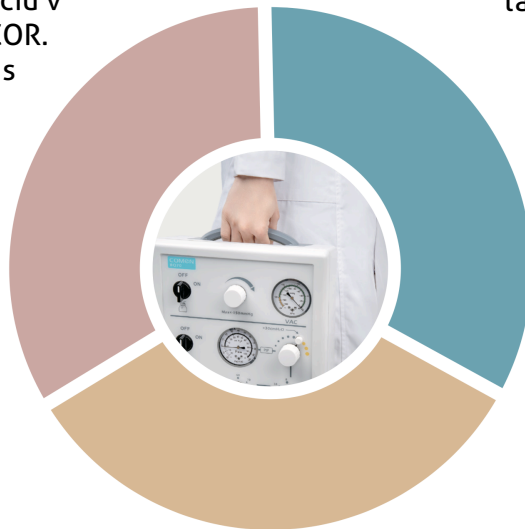

## Spolahlivé riadenie tlaku

Viacstupňové limitovanie inspiračného tlaku zabezpečuje, že vopred nastavené hodnoty zostávajú stabilné behom celej doby resuscitácie bez ohľadu na zmeny v stave pľúc novorodenca



## Základné technické parametre

rozмеры	27 cm x 17 cm x 34 cm
hmotnosť	4,9 kg
odsávací podtlak	-150 - 0 kPa
O2 koncentrácia	21 - 100 %
prietok 1 (resuscitačný okruh)	0 - 15 l/min
prietok 2 (sekundárny / rPAP)	0 - 15 l/min
PIP1 - rozsah nastavenia	0 - 30 kPa
PIP2 - prekročenie limitu	30 - 45 kPa



## Príslušenstvo

- jednorázový okruh s T-kusom a PEEP ventilom
- neonatálne masky veľkosti 0 a 1
- Inspire rPAP generátor s okruhom
- Inspire rPAP nozdrilky S, M a L
- testovacie pľúca pre prednastavenie tlaku
- mobilný stojan s košíkom



**DARTIN**

DARTIN Slovensko spol. s r. o.  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 Prešov \* Pribylinská 4, 831 04 Bratislava  
Tel. / fax: 051 7734403, 7723634 02 44871553, 44681035  
URL: <http://www.dartin.sk>  
e-mail: [info@dartin.sk](mailto:info@dartin.sk)

**COMEN**

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.  
Add No. 2 of FIYTE Timepiece Building, Nanhuan Avenue  
Gongming Sub-district, Guangming New District, Shenzhen, P.R. China  
Phone: +86 755 2640 8879 Fax: +86 755 2643 1232  
URL: <http://www.en.comen.com>  
e-mail: [info@szcomen.com](mailto:info@szcomen.com)